РОБОТ–ТРЕНАЖЕР «ГАВРЮША»

для отработки навыков извлечения инородного тела у младенцев





Инородное тело (магнит)




Элементы питания (тип АА)

Индикация состояний робота–тренажера



Зелёный светодиод: индикатор питания, подтверждает достаточный уровень заряда батарей, тренажер включен и готов к работе.

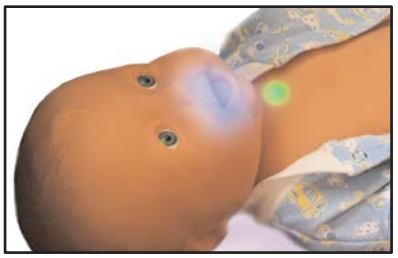


Синий светодиод: индикатор «умирания», сопровождающийся хрипами на вдохе. Если инородное тело не извлечь правильно в течение 30 секунд, у тренажера исчезнет пульс на плечевой артерии.




Красный светодиод: индикатор «оживления», сопровождающийся пронзительным криком. Самостоятельный пульс на плечевой артерии будет сохраняться около трёх минут.

Включение и выключение робота–тренажера

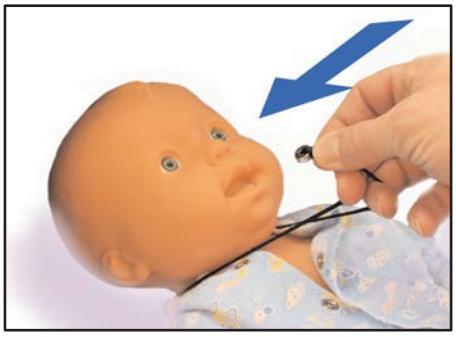

Вставить в рот тренажера «инородное тело» (магнит).

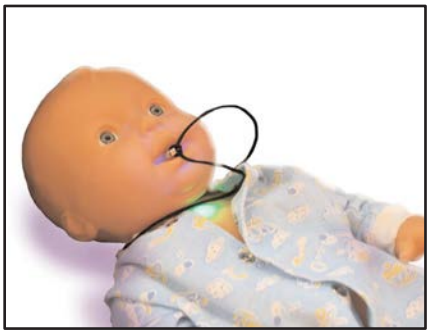


Тренажер включится, произойдёт самотестирование (загорятся все светодиоды и прозвучит звуковой сигнал), появится пульс на плечевой артерии, хрипы на вдохе и у робота начнёт синеть носогубный треугольник.




Для выключения тренажера следует вытащить инородное тело, а затем снова вставить и в течение 1 секунды вытащить его изо рта. Если в течение 30 секунд инородное тело не извлечено, тренажер «умирает» и выключается автоматически.


Извлечение инородного тела

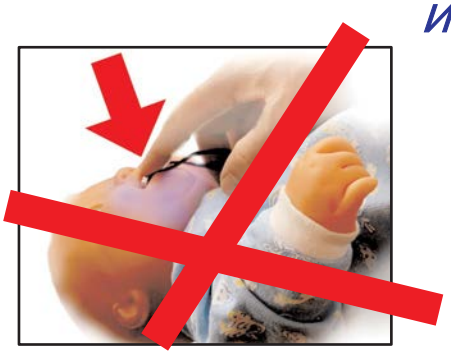

При попытке извлечь инородное тело в положении лежа на спине или если угол переворота был недостаточный «Гаврюша» умирает: исчезает пульс на плечевой артерии.

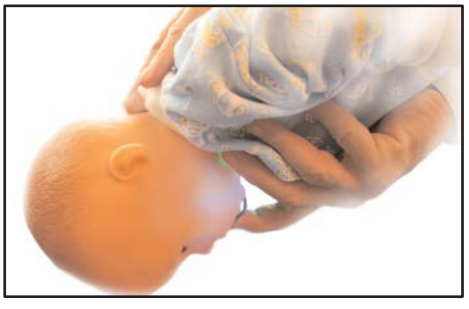

Следует положить младенца животиком на свою ладонь так, чтобы его голова была ниже таза и указательным пальцем попытаться извлечь инородное тело. Если эта попытка не увенчалась успехом, следует нанести несколько шлепков по спинке или попке.

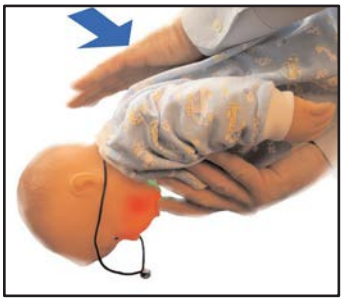

Шлепки следует наносить с ограниченной силой раскрытой ладони. Нельзя наносить удары ребром ладони или кулаком.


Правила замены элементов питания

1



Отвернуть контакт-заглушку монетой или отверткой.

2

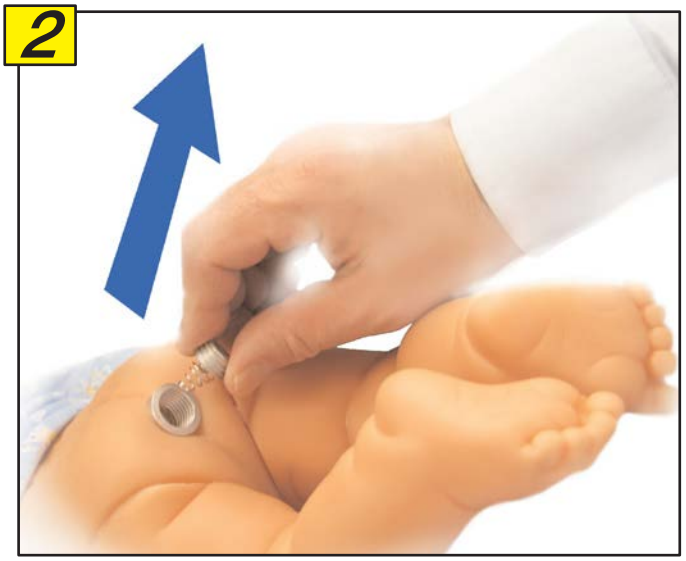

Открыть контейнер для замены элементов питания.

3




Извлечь старые элементы питания и, соблюдая полярность («плюсом» вниз), вставить новые батарейки (тип АА).

4




Завернуть контакт-заглушку. Если элементы питания установлены правильно на 1 секунду загорится зелёный индикатор.

5

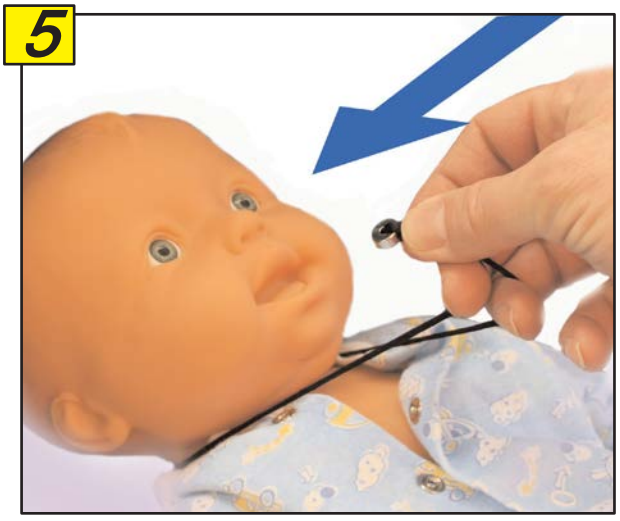

Вставить в рот тренажера «инородное тело» (магнит).

6

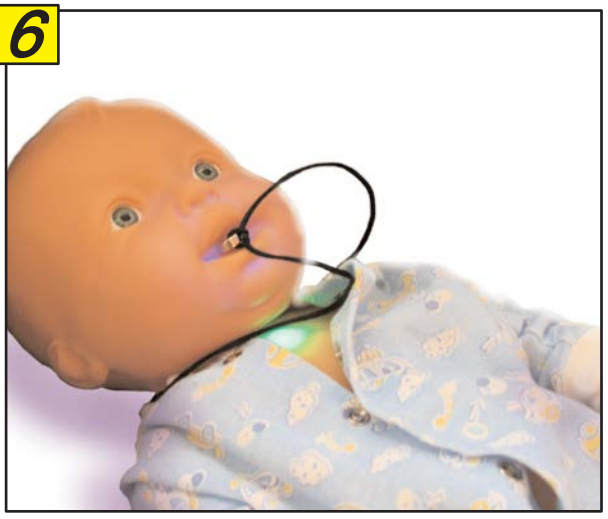

Произойдёт самотестирование робота, он готов к работе.

Запрещается заливать в тренажер жидкости или опускать его в воду! Правила робота следует протирать тканевыми или ватными тампонами, смоченными спиртом или мыльным раствором

Гарантийный срок: 1 год со дня продажи
Производитель: ООО «Гало»

© ООО «ГАЛО», 2011

автор макета: В. Бубнов, фото: А. Бубнов